

# PROSEDYRE VED RUSMIDDELTESTING I URIN TIL SANKSJONÆRE FORMÅL

## SEKSJON FOR KLINISK FARMAKOLOGI ULLEVÅL

Med **sanksjonære prøver** menes prøver hvor positivt analysesvar *alene* kan føre til alvorlige sanksjoner eller tap av tilbud og/eller rettigheter. Rettssikkerhetsmessige hensyn tilsier at slike prøver alltid skal tas i tråd med retts toksikologiske prinsipper. Dette innebærer korrekt håndtering av prøven i alle ledd fra prøvetaking til endelig svarrapport.

Helsedirektoratet har utarbeidet prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Prosedyrene beskriver kvalitetskrav til faglig forsvarlig rusmiddeltesting. De angir hvilke forholdsregler som bør eller skal følges ved prøvetaking, forsendelse, analyse, fortolkning og iverksetting av tiltak på grunnlag av analyseresultater. Ved rekvirering av rusmiddelprøver er rekvirenter, prøvetakere og laboratorier forpliktet til å sette seg inn i disse prosedyrene. (<https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/prosedyrer-for-rusmiddeltesting>)

### Prøvetaking

Det skal tydelig fremgå av rekvisisjonen at formålet med urinprøven er sanksjonær. På rekvisisjonen «Analyse av legemidler og rusmidler, seksjon for klinisk farmakologi Ullevål» kan man krysse av for dette på side 2. Prøvegivers bruk av medikamenter de siste 30 dager før prøvetakingen bør påføres rekvisisjonen.

Ved sanksjonære prøver tas en urinprøve som fordeles på *minst to* prøverør (delprøver). Alle delprøver skal merkes og forsegles. Det er derfor viktig at det ved sanksjonære prøver benyttes standardrør som kan forsegles (urin monovette med forseglingskork, se side 2 av dette skrevet).

Laboratoriet på Ullevål vil alltid utføre bekreftelsesanalyse med spesifikk metodikk ved positiv screeninganalyse dersom rekvirenten har krysset av for sanksjonær prøve.

### Transport av prøven

Ved innsending av prøver til sanksjonære formål skal det brukes egen konvolutt merket «Sanksjonær prøve». Konvoluttene har påtrykt adresse og kan sendes i posten eller leveres ved Enhet for farmakologiske analyser, Ullevål mellom kl. 0730 og kl. 1500 mandag til fredag. Bruk av disse konvoluttene er viktig for å sikre at prøvesikringskjeden blir ivaretatt ved ankomst til laboratoriet.

**For at en urinprøve skal behandles som sanksjonær ved laboratoriet skal det være avkrysset på rekvisisjonen at formålet med urinprøven er sanksjonær og prøven må være sendt i spesialkonvolutt merket «Sanksjonær prøve».**

#### Adresse ved levering av prøven:

Enhet for farmakologiske analyser, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo  
Bygg 6 (Midtblokken), inngang 6B, 5. etg, rom 0605034


### Bestilling av rekvisisjon og prøvetakingsutstyr

Rekvisisjonsskjemaer og prøverør (urin monovette med forseglingskork) bestilles fra:  
Emballasjetjenesten, Oslo universitetssykehus, Ullevål, tlf. 22 11 92 98.

Konvolutter merket «Sanksjonær prøve» bestilles fra:  
Enhet for farmakologiske analyser, Ullevål (tlf. 22 11 94 64/[farm@ous-hf.no](mailto:farm@ous-hf.no)).

**Ved spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 22119464 (lab) eller 48016274 (lege).**

## Bruksanvisning ved bruk av Sarstedt forseglet urinmonovette

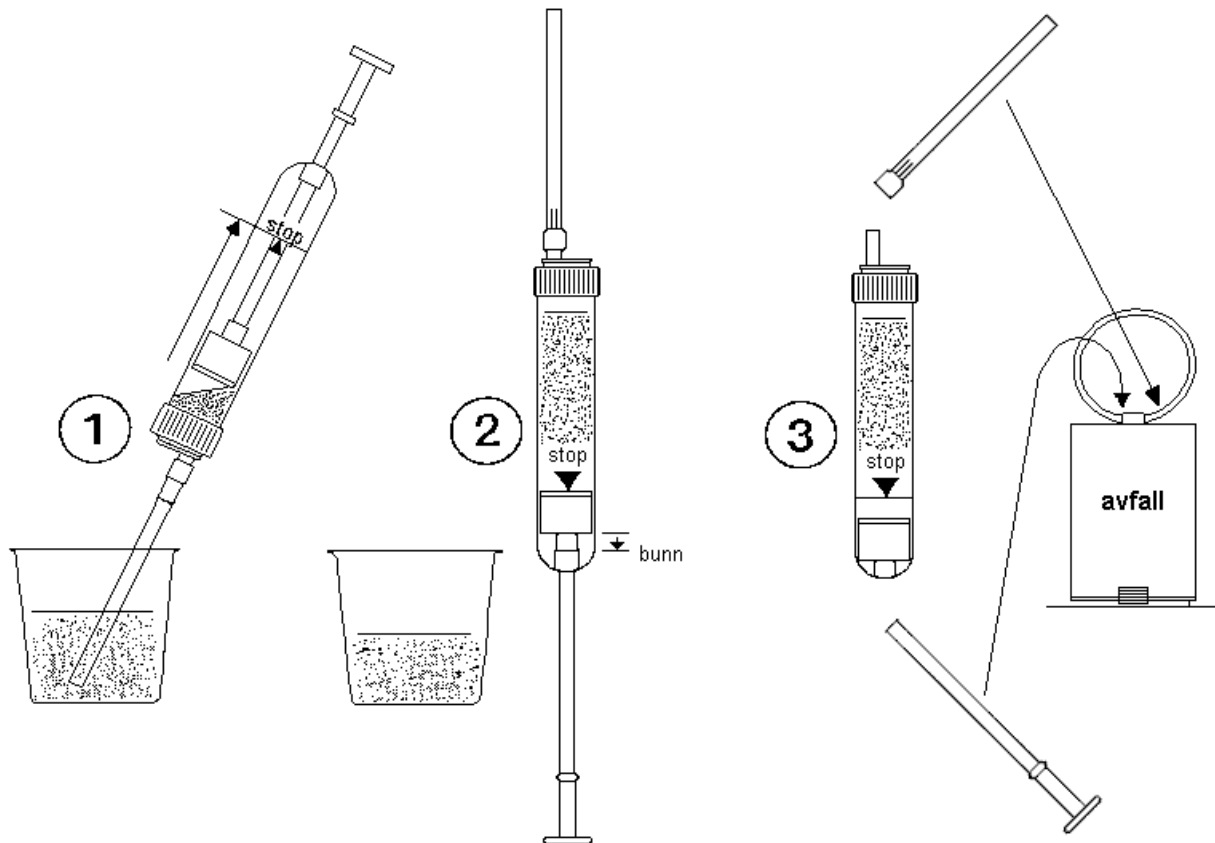

1. Ta av den lille gule toppen. Sett gul plastkanyle på sprøyten, stikk kanylen ned i urinprøven og trekk stempel opp til underkant av etikett.
2. Hold sprøyten i vertikal posisjon med kanylen pekende oppover. Trekk deretter stampelet helt til bunn slik at kanylespissen tømmes. Trekk helt ned selv om urinmonovetten ikke blir helt full.
3. Ta av kanylen og sett på den lille gule toppen. Brekk deretter av stempelstangen helt inne ved sprøyten. Kast kanyle og stempelstang.
4. Sett på forseglingskorken.

**NB! Press (ikke skru) ned over "kragen" på urinmonovetten til du hører et lite klikk.**

5. Merk urinmonovetten på langs med korrekt strekkodeetikett fra rekvisisjonsskjemaet.